

第二篇 取血篇

(二星 实验技术操作难度为较容易)

一、兔取血技术

使用器材：兔固定盒或固定板、电动剃毛刀

使用耗材：75% 酒精棉球、采血针、注射器、采血管、干棉球

(一) 兔耳静脉取血

将兔置于兔固定盒或固定板后，露出两耳，

选静脉清晰的耳朵脱毛，

酒精棉球擦拭后，用拇指压迫耳根部，使静脉充盈后即可用针头穿刺静脉采血。

*如取血量在1mL以内时，可待耳缘静脉充血后，在靠近耳尖血管，用针头刺破血管，即从刺破口流出血液。

(二) 兔耳动脉取血


将兔置于兔固定盒或固定板后，露出两耳，

在耳中央有一条较粗且颜色鲜红的动脉，

取血时用一只手固定兔耳，

另一只手用注射器在动脉中央远心端，

与动脉平行的向心方向刺入动脉，

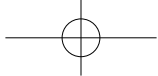

即可见动脉血进入针管，
采血后用干棉球压迫止血。

* 此法一次抽血可达 15mL，采血针一般用 6 号针头。

* 针刺部位应从静脉末端开始，不要在耳根部采血，因耳根部软组织厚，血管位略深，易刺透血管导致皮下出血。

* 兔耳动脉易发生痉挛性收缩，抽血前，须轻拍兔耳，让兔耳充分充血，当动脉扩张，未发生痉挛收缩前，立即进行抽血。